


MENSAJES INDICADORES DE PANTALLA:

MENSAJE EN LA PANTALLA	QUE HACER
FUNC VOL REC BAJO	Pita de tanto en tanto, cuando en el casete quedan menos de 5 ml para avisarle del fin próximo de la infusión de medicación.
VOL RECIPIENTE VACIO	Pita de forma continuada para indicar que el contenido del casete se ha terminado. Ha de apretar el botón de PARA/INICIO para que deje de sonar. A partir de este momento tiene un margen de dos horas para acudir al Hospital.
PILAS BAJAS PILAS AGOTADAS	Es muy poco probable ya que las pilas que utilizamos son siempre nuevas. Pare la bomba y cámbielas por otras pilas alcalinas nuevas de 1,5V (como si fuera una radio). Recuerde que están en la parte posterior de la máquina.
PRESIÓN ELEVADA	Ha de apretar el botón de PARADA/INICIO para que deje de sonar y revisar la alargadera que va de la bomba a la aguja, probablemente se ha pinzado o se ha cerrado la pinza sin querer. Una vez arreglado ha de reiniciar la bomba apretando de nuevo el botón de PARADA/INICIO .
CASSETTE DESCONECTADO PINZAR LA LÍNEA	Pita porque se ha desconectado el casete. Ha de parar la máquina y encenderla de nuevo, si continúa pitando llame a Hospital de Día.

Si tiene alguna otra duda puede llamar a Hospital de Día de lunes a viernes de 9 a 20h
Teif. Centralita Clínica Quirón: 93 285 00 00
Ext. Hospital de Día: 12820

Fuera de ese horario puede llamar al siguiente teléfono

UCC 902 88 99 01

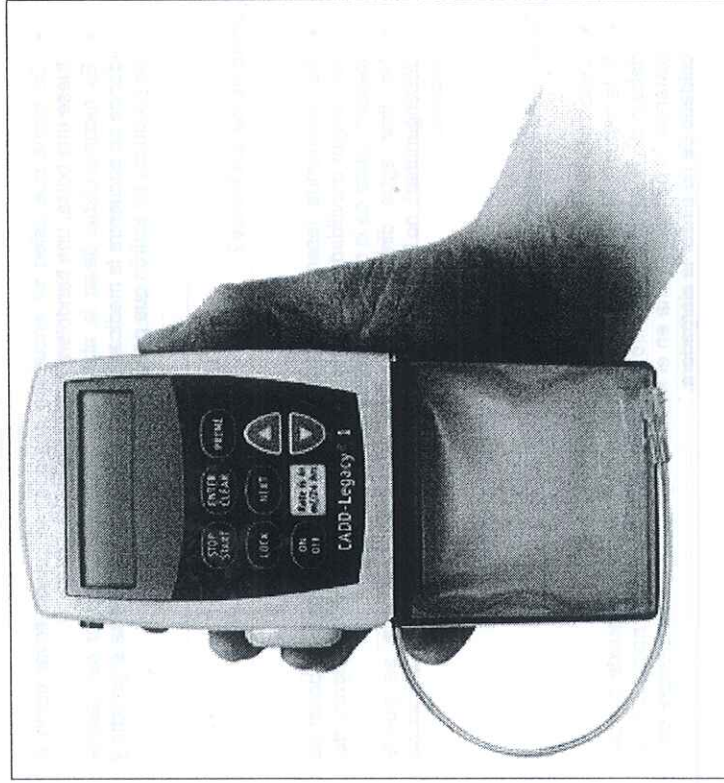

INFORMACIÓN PARA PACIENTES PORTADORES DE UNA BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA:

Usted es portador de una bomba de infusión portátil; este es un sistema PATRA que administra su tratamiento de una manera muy precisa y que a la vez le permite llevar una vida prácticamente normal.

A continuación le facilitamos información sobre las preguntas más comunes que usted se puede hacer.

¿Cómo he de llevar la bomba?

- De forma que usted se encuentre cómodo, se puede llevar como si fuese una bolsa, una bandolera o riñonera.
- Es recomendable llevar la alargadera enrollada alrededor del casete donde se encuentra la medicación con el fin de evitar que se enganche y se produzca un estirón que pueda despinchar la aguja.

¿Cómo he de ducharme?

- Se recomienda desenrollar la alargadera de la bomba para disponer de una mayor movilidad y colocarla sobre un taburete, WC o colgada del toallero cerca de la ducha, de forma que no se moje.
- No tirar agua directamente sobre el apósito (ya que se puede desenganchar), no frotar esta zona con jabón ni con la toalla a la hora de secarse.

¿Cómo he de dormir?

- Desenrolle la alargadera para tener más movilidad.
- Si le molesta el ruido del funcionamiento de la bomba, la puede colocar debajo de la almohada, dentro del cajón de la mesita de noche o si la distancia lo permite dejarla en el suelo debajo de la cama; siempre con cuidado de no pinzar la alargadera.

¿Qué he de hacer si...?

- **Si se despegó el apósito:** Esto no significa que se haya despinchado. Se pueden hacer dos cosas:
 - Fijarlo con esparadrapo
 - Acercarse al Hospital de Día para que se lo fijen.
- **Si me duele, tengo escozor o se me inflama la zona de inserción de la aguja:**
Nos tiene que llamar y nosotros le indicaremos todo lo que ha de hacer.
- **Si se sale la aguja de la piel:**
Conserve la calma y pare la máquina. Tenga cuidado de no pincharse. Y seguidamente venga a Hospital de Día.

¿Cómo y cuando he de parar la bomba?

- La bomba solo debe pararse en caso de que suene la alarma o tras finalizar la infusión del medicamento.
- Ha de mantener apretada la tecla **PARADA/INICIO** hasta que desaparezcan tres grupos de rayas: --- ---, entonces deje de apretar el botón y saldrá en la pantalla el mensaje: **PARADA**

¿Cómo y cuando he de iniciar la bomba?

- Ha de iniciar la bomba después de haberla apagado para solucionar un pequeño problema.
- Ha de mantener apretada la tecla **PARADA/INICIO** hasta que aparezcan tres grupos de rayas: --- ---, entonces deje de apretar el botón y saldrá en la pantalla el mensaje: **FUNC** e irán apareciendo todos los datos que tiene introducidos la máquina.
- Todo está OK.